


Table **ADONE** à trois plans réglable électriquement en hauteur pour examen et thérapie de traction utilisée par professionnels du secteur de la rééducation et du massage. La table est livrée avec tout ce qui est nécessaire pour les tractions lombaires et cervicales et avec un châssis supplémentaire et amovible de soutien à l'unité de traction et roulettes escamotables.



**UNITÉ DE TRACTION
NON INCLUSE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	3
Plan central	Fixe
Dossier coulissant	12 cm
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	32 cm
Largeur	70 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur réglée électriquement	55 - 86 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / Declive tête avec vérin à gaz	+60° - 20°
Trou visage avec bouchon	Inclus
Roulettes escamotables	4
Poids	70 kg

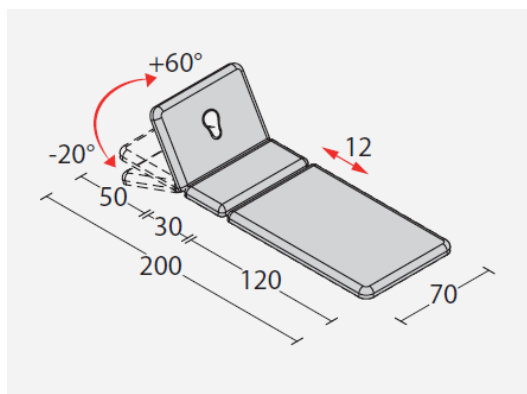

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

ADONE MODÈLES

Description	Code
Adone pédale de commande.	1114A12P1S

SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR

ADONE avec pédale de commande 24 V



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m ³
Hauteur rembourrement	40 mm



COLORIS SELLERIE



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal ≥ 210 Trasversalement ≥ 90
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal ≥ 85 Trasversalement ≥ 140
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal ≥ 2,5 Trasversalement ≥ 2,2
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldéhyde libre ou Partiellement hydrolysable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulières	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test pour meubles rembourrés"
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN
COMBUSTION LENTE
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en
combustion lente
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle
d'une allumette

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC TABLE ADONE

<p>Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 75 mm.</p>	
<p>Fléau de suspension pour sangle d'immobilisation bassin.</p>	
<p>Sangle d'immobilisation thorax. Disponible en deux dimensions (petite et grande)</p>	
<p>Sangle d'immobilisation bassin. Disponible en deux dimensions (petite et grande)</p>	
<p>Mentonnière et fléau de suspension.</p>	
<p>Coussin trapèze. Dimensions : 40X50X30 cm. Le coloris des coussins correspond au coloris de la sellerie de la table.</p>	
<p>Coussin cale. Dimensions : 45x45x15 cm. Le coloris des coussins correspond au coloris de la sellerie de la table.</p>	
<p>Coussin demi cylindrique. Dimensions : 30x16x8 cm. Le coloris des coussins correspond au coloris de la sellerie de la table.</p>	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE TRACTION

Code 1214050 AIMANT DE SÉCURITÉ

Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

Code 1214060 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.



Code 1214070 PRISE SUISSE



Code 1214071 PRISE UK



OPTIONS GÉNÉRALES

Code 1210020 PORTE ROULEAU DRAP D'EXAMEN SUR PIEDS

Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.

Structure en métal époxy, facile à déplacer.

Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm



Code 1210060 DRAP D'EXAMEN 2 PLIS

Carton de 6 rouleaux

Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956