


UNITÀ TRAZIONE
NON IN DOTAZIONE

Lettino **ADONE** a tre sezioni regolabile elettricamente in altezza, per visita e trazioni utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio. Il lettino viene fornito predisposto per eseguire trazioni lombari e cervicali con un telaio aggiuntivo rimovibile e di supporto per l'applicazione dell'unità di trazione e completo di ruote retrattili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	3
Sezione centrale	Fissa
Pianale scorrevole	12 cm
Passaggio sollevatore	12 cm
Traslazione del piano	32 cm
Larghezza	70 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza elettrica	55 - 86 cm
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Ruote retrattili	4
Peso	70 kg

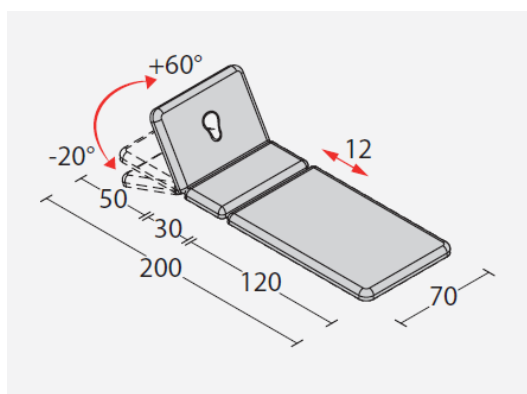

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

VARIANTI DEL LETTINO ADONE

Descrizione	Codice
Adone con comando a pedale.	1114A12P1S

SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA

Comando a pedale 24 V



CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm



COLORI RIVESTIMENTO




Panna P1



Grigio chiaro G2



Tortora P2

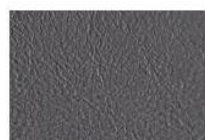

Grigio scuro G3



Giallo G1



Senape G4



Arancione A1



Rosso R1



Bordeaux B2



Viola V4



Blu scuro B3



Blu B1



Marrone scuro M1



Terra M2



Verde V1



Verde bosco V2



Verde foglia V3



Nero N1

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITÀ	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale ≥ 210 Trasversale ≥ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale ≥ 85 Trasversale ≥ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale $\geq 2,5$ Trasversale $\geq 2,2$
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cicli	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test for upholstered furniture"
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

DOTAZIONE COMPLETA DEL LETTINO ADONE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino Ø 75 mm.	
Bilancino per agganciare le cinture dell'imbragatura pelvica.	
Imbragatura toracica. Disponibile in due misure (piccola e grande).	
Imbragatura pelvica. Disponibile in due misure (piccola e grande).	
Mentoniera e archetto per mentoniera.	
Cuscino a trapezio. Dimensioni: 40X50X30 cm. Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.	
Cuscino a cuneo. Dimensioni: 45x45x15 cm. Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.	
Cuscino semi-cilindro. Dimensioni: 30x16x8 cm. Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS PER SERIE TRACTION

Codice 1214050 MAGNETE DI SICUREZZA

Rimuovendo il magnete si impediscono tutte le funzioni elettriche dei comandi così da evitare azionamenti involontari degli attuatori.

Codice 1214060 DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA

Software grazie al quale gli attuatori si attivano solo tramite doppio impulso del comando per evitare azionamenti involontari.



Codice 1214070 – PRESA SVIZZERA



Codice 1214071 – PRESA UK



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956