


Letto **EDO** a due sezioni regolabile elettricamente o idraulicamente in altezza, per terapia, massaggi e visita medica.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	2
Traslazione del piano	17 cm
Larghezza	65 o 80 cm
Lunghezza	190 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza	45 - 90 cm
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	70 kg

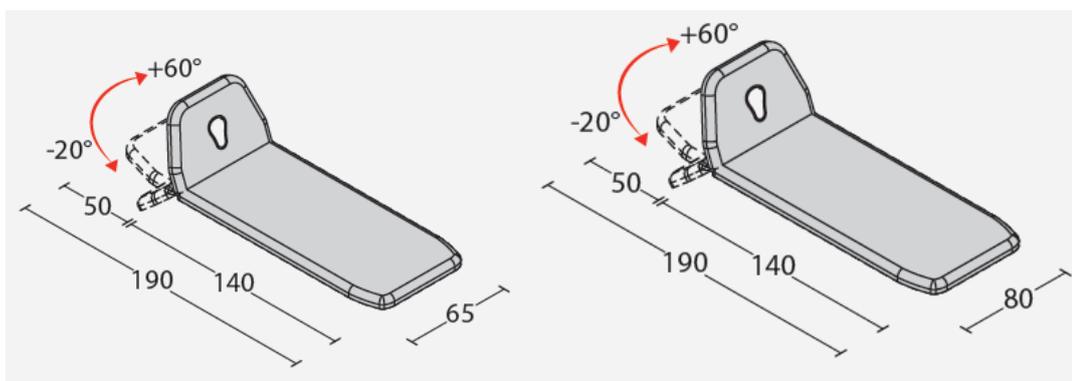

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## VARIANTI DEL LETTINO EDO

Descrizione	Codice
Edo con comando a pedale. "S"tandard / "C"omfort	1111A10P1S/C
Edo con pedaliera circolare. "S"tandard / "C"omfort	1111A10C1S/C
Edo idraulico. "S"tandard / "C"omfort	1111A10R0S/C
Edo LARGE con comando a pedale. "S"tandard / "C"omfort	1111A11P1S/C
Edo LARGE con pedaliera circolare. "S"tandard / "C"omfort	1111A11C1S/C
Edo LARGE idraulico. "S"tandard / "C"omfort	1111A11R0S/C

## SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA

Edo con comando a pedale 24 V



Edo con pedaliera circolare



Edo idraulico



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## FORO VISO

<b>STANDARD – COMPLETO DI TAPPO</b>	<b>COMFORT – COMPLETO DI TAPPO</b>
	
	

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto  
Classe reazione al fuoco  
Densità imbottitura  
Altezza imbottitura

Poliuretano espanso  
1 IM  
30 kg/m<sup>3</sup>  
40 mm



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## COLORI RIVESTIMENTO



## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITA	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale $\geq 210$ Trasversale $\geq 90$
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale $\geq 85$ Trasversale $\geq 140$
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale $\geq 2,5$ Trasversale $\geq 2,2$
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cicli	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test for upholstered furniture"  
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA  
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO  
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta  
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

### FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS SERIE PROFESSIONAL

### **Codice 1210010 SUPPORTO ROTOLO CARTA**

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



### **Codice 1211010 RUOTE**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino  
Ø 60 mm.



### **Codice 1210030 SPONDE LATERALI**

Sponde laterali per una maggiore sicurezza del paziente mentre è disteso sul lettino. Posizionabili con un semplice meccanismo manuale.



### **Codice 1211020 MAGNETE DI SICUREZZA**

Rimuovendo il magnete si impediscono tutte le funzioni elettriche dei comandi così da evitare azionamenti involontari degli attuatori.

### **Codice 1211030 DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA**

Software grazie al quale gli attuatori si attivano solo tramite doppio impulso del comando per evitare azionamenti involontari.



### **Codice 1211040 – PRESA SVIZZERA**



### **Codice 1211041 – PRESA UK**



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956