


Lettino **GIOVE 2** a due sezioni
regolabile elettricamente o
idraulicamente in altezza, per terapia,
massaggi e visita medica.

Struttura che permette di regolare
l'altezza senza traslazione del piano.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	2
Passaggio sollevatore	12 cm
Traslazione del piano	0 cm
Larghezza	65 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza	49 - 95 cm
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+70° -40°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	70 kg

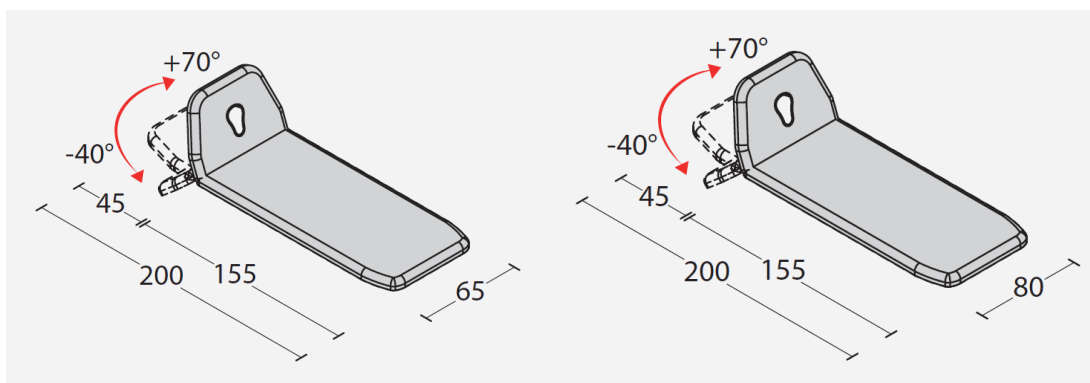

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

VARIANTI DEL LETTINO GIOVE2

Descrizione	Codice RAL 7016	Codice RAL 7035
Giove 2 con comando a pedale. "S"tandard / "C"omfort	1118B20P1S/C	1118B30P1S/C
Giove 2 con pedaliera circolare. "S"tandard / "C"omfort	1118B20C1S/C	1118B30C1S/C
Giove 2 con pedaliera circolare in alluminio. "S"tandard / "C"omfort	1118B20A1S/C	1118B30A1S/C
Giove 2 idraulico. "S"tandard / "C"omfort	1118B20R0S/C	1118B30R0S/C
Giove 2 LARGE con comando a pedale. "S"tandard / "C"omfort	1118B21P1S/C	1118B31P1S/C
Giove 2 LARGE con pedaliera circolare. "S"tandard / "C"omfort	1118B21C1S/C	1118B31C1S/C
Giove 2 LARGE pedaliera circolare alluminio. "S"tandard / "C"omfort	1118B21A1S/C	1118B31A1S/C
Giove 2 LARGE idraulico. "S"tandard / "C"omfort	1118B21R0S/C	1118B31R0S/C

SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA



Giove 2 con comando a pedale 24 V



Giove 2 con pedaliera circolare



Giove 2 con pedaliera circolare in alluminio



Giove 2 idraulico

COLORI STRUTTURA DISPONIBILI

Colore struttura RAL 7016



Colore struttura RAL 7035



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

FORO VISO

STANDARD – COMPLETO DI TAPPO	COMFORT – COMPLETO DI TAPPO
	
	

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

COLORI RIVESTIMENTO



CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITÀ	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale ≥ 210 Trasversale ≥ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale ≥ 85 Trasversale ≥ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale ≥ 2,5 Trasversale ≥ 2,2
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cicli	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test for upholstered furniture"
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS SERIE TOP

Codice 1218010 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



Codice 1218020 RUOTE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino
Ø 75 mm.



Codice 1218030 MAGNETE DI SICUREZZA

Rimuovendo il magnete si impediscono tutte le funzioni elettriche dei comandi così da evitare azionamenti involontari degli attuatori.

Codice 1218040 DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA

Software grazie al quale gli attuatori si attivano solo tramite doppio impulso del comando per evitare azionamenti involontari.

**NON DISPONIBILE SU MOVIMENTO CON PEDALIERA
CIRCOLARE IN ALLUMINIO.**



Codice 1218050 – PRESA SVIZZERA



Codice 1218051 – PRESA UK



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956